

МАССАЖНОЕ КРЕСЛО

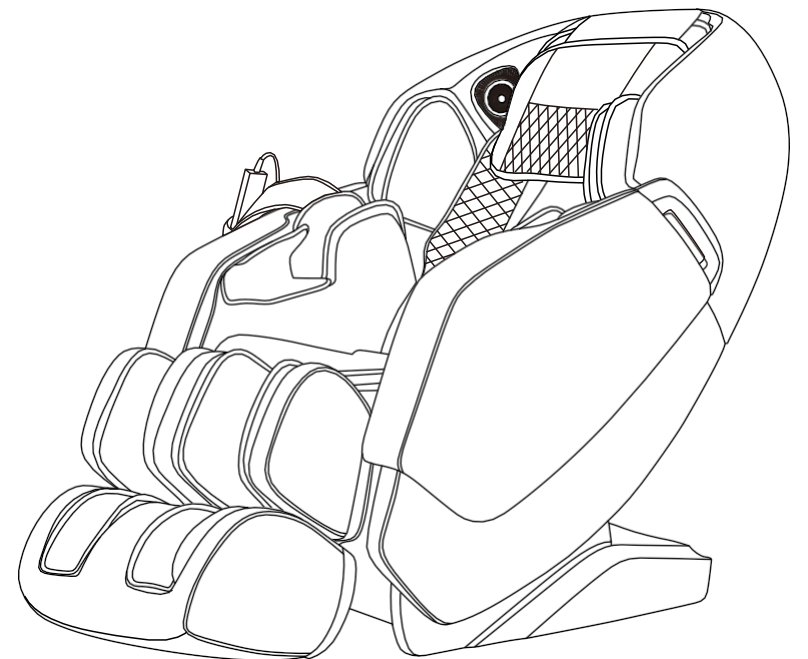
JERA ORTO

Инструкция по эксплуатации



Jera

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ



Благодарим за приобретение этого продукта. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство до использования данного продукта, чтобы узнать, как правильно им пользоваться. Пожалуйста, уделите должное внимание важным указаниям по технике безопасности и сохраните руководство надлежащим образом для использования в будущем.

Примечание: Наша Компания оставляет за собой право изменить дизайн и описание продукта без любых последующих уведомлений. Пожалуйста, уточните действительный цвет этого продукта.

СОДЕРЖАНИЕ

Безопасность и обслуживание	02
Указание мер безопасности	04
Название и функции компонентов	06
Функция	07
Способ использования	08
Спецификации изделия	17
Гарантийные обязательства и талон	18
История и предназначение	19

Безопасность и обслуживание

1. Важное указание мер безопасности



- Не позволяйте детям касаться движущейся части этого продукта.
- Используйте подходящий и должным образом заземленный источник питания.
- Пожалуйста, отключайте продукт из розетки до начала чистки, чтобы избежать травм и повреждения продукта.
- Пожалуйста, используйте продукт в соответствии с инструкциями из этого руководства.
- Не используйте аксессуары, которые не считаются рекомендованными.
- Не используйте продукт вне помещений.
- Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство перед использованием продукта.
- Любой способ использования, не описанный в руководстве, запрещен.
- Рекомендованное время использования - 20 минут.
- Пожалуйста, не используйте продукт, если кожа порвана или повреждена иным образом.
- Пожалуйста, не используйте продукт, если покрытие или кожа повреждены.
 - Пожалуйста, не используйте продукт, если отверстие радиатора заблокировано или закрыто.
- Пожалуйста, не роняйте что-либо на данный продукт.
- Пожалуйста, не засыпайте во время использования продукта.
- Пожалуйста, не используйте продукт в состоянии опьянения или при плохом самочувствии.
- Пожалуйста, не используйте продукт в течение часа после приема пищи.
- Пожалуйста, не устанавливайте уровень массажа слишком высоким во избежание травм.

2. Среда для использования.

- Пожалуйста, не используйте продукт в условиях высокой температуры и влажности - например, в ванной комнате.
- Пожалуйста, не используйте продукт сразу после резкого изменения условий среды.
- Пожалуйста, не используйте продукт в способствующих коррозии условиях, или в условиях сильной запыленности.
- Пожалуйста, не используйте продукт при условии недостатка свободного места или хорошей вентиляции.

3. Люди, которым не подходит данный продукт.

- Люди, страдающие от остеопороза, не могут использовать данный продукт.
- Люди, страдающие от болезней, связанных с сердцем или использующие электронное медицинское оборудование, например, кардиостимулятор, не могут использовать данный продукт.
- Люди, страдающие от лихорадки, не подходят для использования данного продукта.
- Беременные женщины, или женщины, претерпевающие менструальный цикл, не могут использовать данный продукт.
- Травмированные люди, или люди, страдающие от заболеваний кожи, не подходят для использования данного продукта.
- Дети младше 14 лет, или же психически неуравновешенные люди, находясь без надзора, не могут использовать данное устройство.
- Люди, которым по рекомендации врача положен отдых, или же дурно себя чувствующие, не могут использовать данный продукт.
- Людям со влажной кожей запрещено использовать данный продукт.
 - Устройство имеет нагретую поверхность. Личности, нечувствительные к высокой температуре, должны быть осторожны во время использования прибора.

• Безопасность.

- Проверьте, соответствует ли напряжение в вашей сети спецификациям продукта.
- Не доставайте вилку из розетки мокрой рукой.
- Во избежание электрического шока или повреждения продукта, не давайте воде попадать внутрь прибора.

Безопасность и обслуживание

- Не повреждайте провода и не изменяйте цепи в данном продукте.
- Не очищайте связанные с электричеством части продукта, например, переключатель и вилку, влажной тканью.
- Во время отключения электроэнергии, держитесь подальше от продукта, во избежание травм, если подача энергии восстановится внезапно.
 - Прекратите использование продукта, если он работает не в должном режиме, и, пожалуйста, немедленно свяжитесь с местным представителем.
- Если ваше самочувствие ухудшилось, прекратите использование продукта и, пожалуйста, свяжитесь с вашим врачом.
 - Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или отсутствием опыта и знаний, если только им не был обеспечен надзор или предоставлены инструкции касательно использования прибора лицами, ответственными за их безопасность.
- За детьми надлежит следить, чтобы удостовериться, что они не будут играть с прибором.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или специалистом с аналогичной квалификацией во избежание опасности.

5. Обслуживание.

- Продукт должен обслуживаться специально назначенными агентами, пользователям запрещается самостоятельно разбирать или обслуживать прибор.
- Пожалуйста, не забывайте отключать прибор от сети после использования.
- Не используйте продукт, если розетка разболталась.
- Если продукт не будет использоваться в течение долгого времени, пожалуйста, скрутите провода и поставьте прибор в сухое и чистое от пыли место.
- Не храните прибор в условиях высокой температуры или возле открытого огня, и старайтесь избегать длительного контакта продукта с прямыми солнечными лучами.
 - Если отделяющийся шнур / шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или специалистом с аналогичной квалификацией во избежание опасности.
- Пожалуйста, чистите продукт сухой тканью. Не используйте растворитель, бензин или спирт.
- Механические компоненты продукта спроектированы и изготовлены особым образом, а потому им не требуется особое обслуживание.
- Не используйте острые предметы для подталкивания данного продукта.
 - Не тащите и не толкайте данный продукт по неровной поверхности - перед перемещением его следует сначала поднять.
 - Пожалуйста, используйте прибор с перерывами; не давайте продукту работать слишком долго.

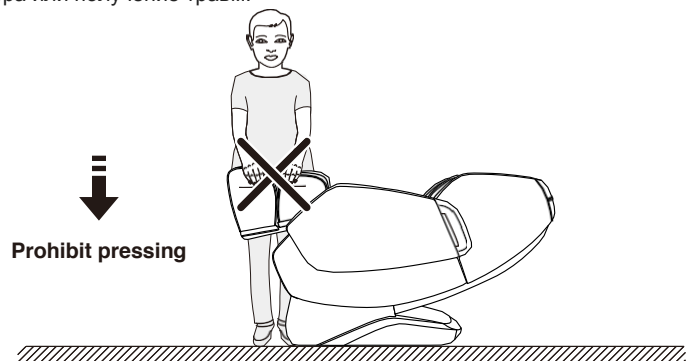
6. Решение обычных неисправностей.

- Наличие звуков работы двигателя естественно во время использования прибора.
- Если пульт управления не работает должным образом, пожалуйста, проверьте, хорошо ли вилка сидит в розетке и включен ли переключатель.
 - Если заданное рабочее время прошло, продукт выключится самостоятельно; если продукт работает продолжительное время, система защиты от перегрева автоматически отключит прибор - использовать его снова будет возможно спустя полчаса.

Указание мер безопасности


⚠ Предупреждение

Когда отделение для ног поднимается, не следует на него давить, во избежание заваливания кресла вперед, что повлечет за собой повреждение прибора или получение травм.



⚠ Предупреждение

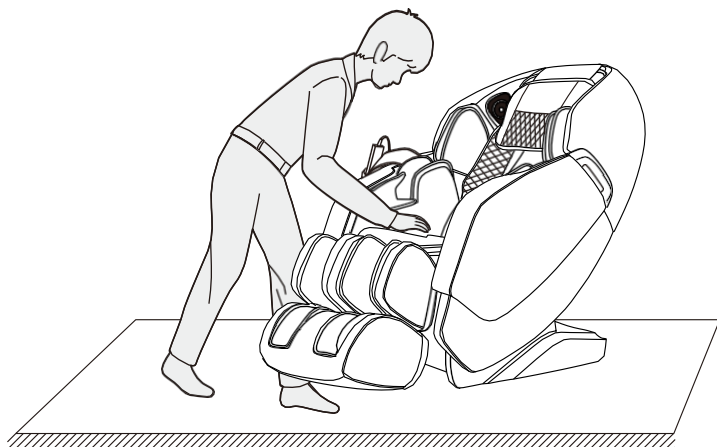
Перед посадкой на массажное кресло, во избежание дискомфорта ягодиц или повреждения прибора, убедитесь, что массажный механизм остается в позиции для сидения.



Указание мер безопасности


⚠ Предупреждение

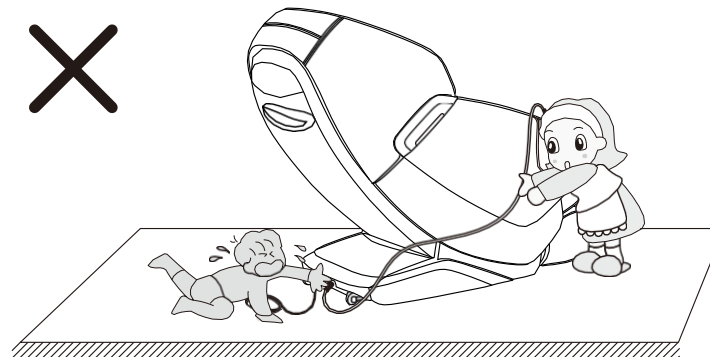Во избежание удара током или повреждения продукта, не пытайтесь вытащить кабель управления или шнур питания во время работы или периода простоя у устройства. После использования кресла рекомендуется отключать кабель управления и шнур питания.




⚠ Предупреждение

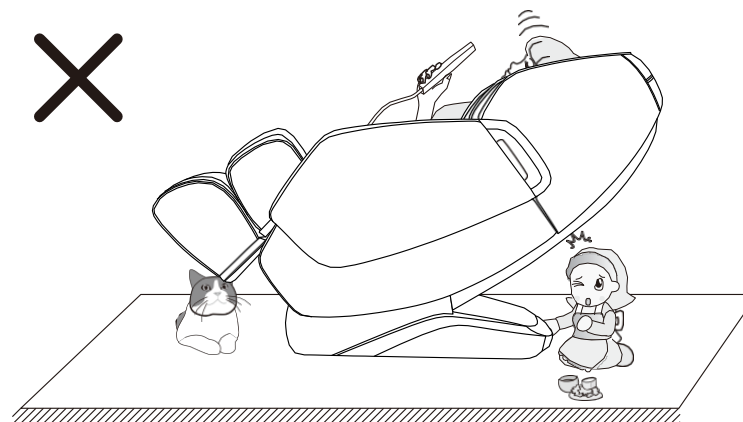
Во избежание травм или повреждения продукта, обязательно убедитесь перед использованием функции "невесомости", что под отделением для ног и спинкой кресла не прячутся дети или питомцы.



Название и функции компонентов

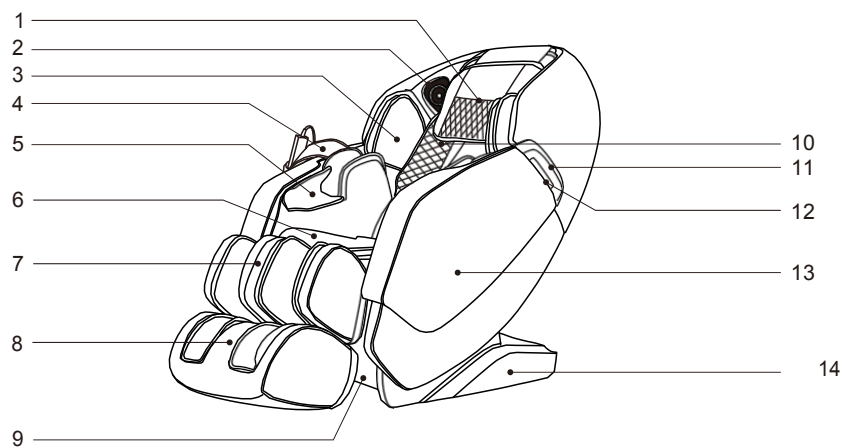

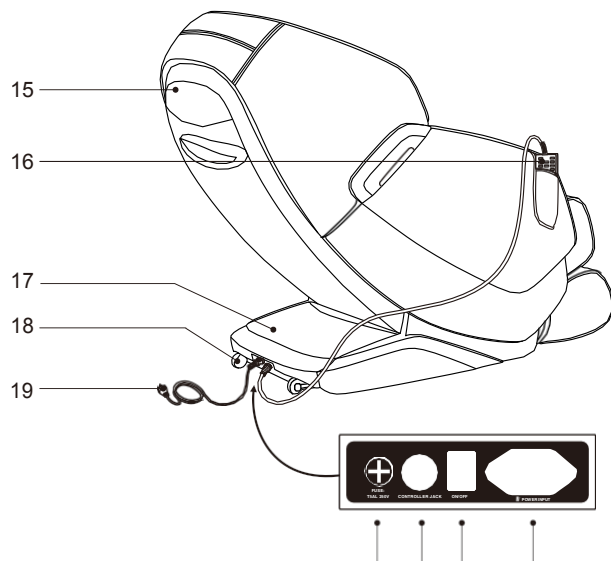1.Подушка
2.3D динамики (с левой стороны присутствует встроенный микрофон)




3.Воздушная подушка для плеч
4.Карман для пульта управления
5.Воздушные подушки для рук
6.Подушка для сидения
7.Воздушные подушки для голеней
8.Воздушные подушки для стоп
9.Каркас отделения для ног
10.Подушка для спины
11.Украшение подлокотников
12.LED подсветка
13.Подлокотник
14.Боковое покрытие
15.Заднее покрытие
16.Пульт управления
17.Покрытие для корпуса РСВ
18.Ролик-колесико
19.Шнур и вилка питания
20.Блок предохранителей
21.Вилка провода пульта дистанционного управления
22.Переключатель питания
23.Разъем шнура питания

Функции

- Кресло спроектировано с четырех-роликовым массажным механизмом движущимся в вертикальной и горизонтальной плоскости.
- В функционале кресла доступны 5 видов симуляции техник массажа: шиацу, разминание, похлопывание, постукивание, разминание и похлопывание.
- Также присутствуют шесть видов автомассажа со своими особенностями: комфорт, расслабление, энергия, пояс и ягодицы, шея и плечо, все тело.
- Доступна функция ручного выбора режима массажа верхней половины тела (зональный, фиксированная точка, вся спина, верхняя половина тела, нижняя половина тела, выбор пяти зон массажа; всего за три шага можно настроить скорость каждой отдельной техники массажа. При массаже фиксированной точки или определенной зоны, массажный механизм может двигаться вверх и вниз для точного определения точки, которую нужно массажировать.
- В режимах шиацу, похлопывания и постукивания возможна настройка расстояния между разминающими роликами: широкое, среднее и узкое.
- Воздушно-компрессионный массаж работает в трех режимах: Воздушный массаж всего тела, массаж рук, массаж ног, с 3 уровнями настройки интенсивности.
- Благодаря технологии подстраивания под изгиб человеческой спины, вы насладитесь персональным массажем с головы до ног.
- Динамики продукта расположены на уровне верхней части рук и позволяют проигрывать музыку, передаваемую через Bluetooth с вашего смартфона или планшета.
- Присутствует функция умного голосового управления
- Присутствует функция массажа одиночным роликом
- Функция прогрева спины использует углеродное волокно в качестве источника инфракрасного излучения
- Подножка может выдвигаться для подстройки под разную длину ног.
- Двигатель синхронизирует движение подножки и спинки кресла, автоматически выполняя две регулировки.
- Спинка массажного кресла должна держаться на расстоянии по крайней мере, 275 мм от стены.
- В ножном массажере размещен природный магнит.
- Пульт дистанционного управления с цветным LCD экраном
- Дизайн включает в себя LED подсветку на обоих подлокотниках.
- Кресло должно быть перезагружено, а затем выключено. Массажные руки также будут приведены в стандартное положение.

Способ использования

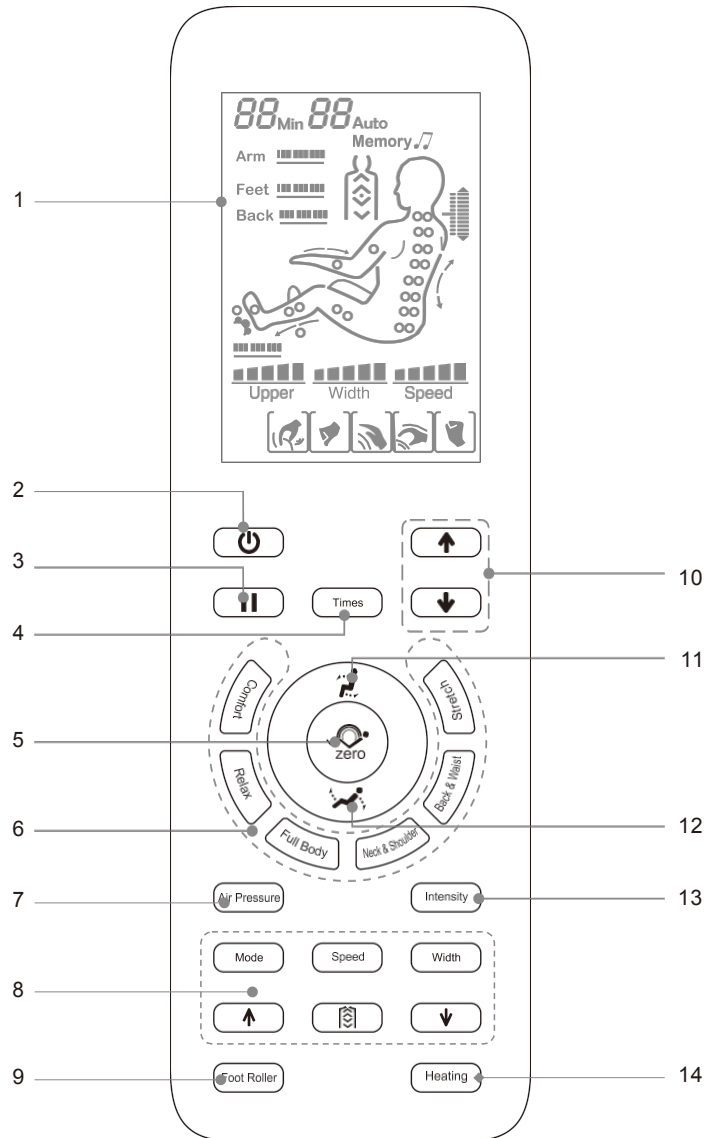Примечание: Спецификации отображают действительные объекты этого продукта!



Способ использования

1. LCD дисплей:

- Показывает все функции и работу кресла

2. Переключатель питания:

- Включить или Выключить все функции массажа.

3. Кнопка Паузы:

- Прервать или Возобновить все функции массажа...

4. Кнопка Выбора времени

- Установка времени

5. Кнопка положения

Нулевой гравитации

- Существуют три позиции лежащего положения, в которые может становиться кресло, выберите вашу любимую.

6. Кнопка Автомассажа

- Пожалуйста, обратитесь за деталями к странице 10 данного руководства.

7. Кнопка воздушно-компрессионного режима

- Функция включения/выключения воздушно-компрессионного массажа (обратитесь за деталями к странице 11 данного руководства).

8. Кнопка ручного выбора режима массажа

- Пожалуйста, обратитесь за деталями к странице 10 данного руководства.

9. Кнопка задействования одного ролика

- Включить/выключить функцию использования одного ролика

- 10. Ручная регулировки подстройки под рост

- Для подстройки точек акупунктуры в шейном отделе.

- 11. Кнопка поднятия

- Поднимает спинку кресла и опускает подножку.

- 12. Кнопка опускания спинки

- Опускает спинку и поднимает подножку.

- 13. Кнопка регулировки интенсивности давления воздуха

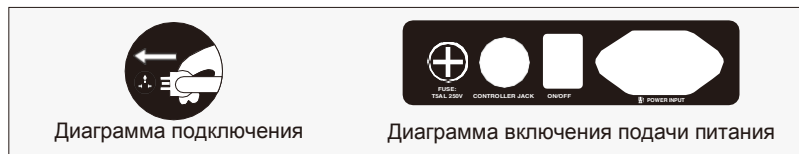
- Регулирует интенсивность давления воздуха в воздушно-компрессионном режиме.

- 14. Подогрев

- Включение/выключение функции прогрева

Способ использования


1. Подача электропитания



2. Начало массажа

1. Нажмите кнопку включения для начала массажа.
2. Кресло проведет сканирование тела, проверит положение ваших плеч и акупунктурных точек массажа, дождитесь окончания сканирования.
3. Если результат сканирования отличается от действительного положения плеч, с помощью кнопок "Вверх" и "Вниз" подстройте подходящую позицию. Возможна настройка по одному из 10 уровней, и у вас есть 10 секунд на регулировку. Спустя 10 секунд, массаж начнется автоматически.

Кнопка	Описание	Дисплей
	Перемещение массажных роликов вверх для принятия подходящей позиции	
	Перемещение массажных роликов вниз для принятия подходящей позиции	

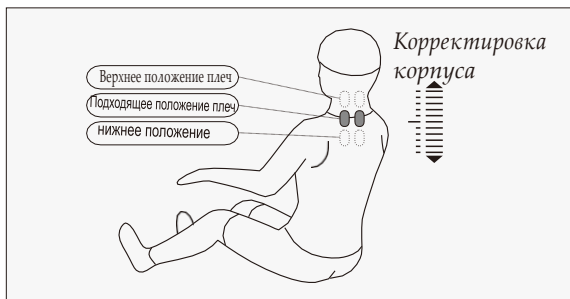

Во время сканирования тела (на экране пульта управления будет показана иконка подстройки положения плеч и будет проигран звук "ДиДи", нажмите кнопки "Вверх" и "Вниз" для корректировки положения плеч). Также вы можете нажать клавишу, отвечающую за один из шести видов автоматического массажа (комфорт, легкость, все тело, шея и плечи, спина и пояс, растяжка) и начать массаж (вы можете пропустить шаг 4 напрямую).

4. Выберите функцию массажа и начните массаж

Способ использования

- Настройка автоматического массажа



Функция Кнопка	Описание	Дисплей	
Настройка автоматического		Комфортный массаж всего тела.	F1 Авто
		Массаж глубоких тканей через точки акупресуры для расслабления болезненных участков.	F2 Авто
		Массаж всего тела, расслабление болезненных участков.	F3 Авто
		Фокусировка на зоне плеч и шеи	F4 Авто
		Фокусировка на спине и пояснице.	F5 Авто
		Подножка и спинка поднимаются вместе, задействуется воздушно-компрессионный массаж для растяжки тела и ног, устранения усталости и восстановления мышц.	F6 Авто

- Ручной выбор режима массажа верхней части тела


Функция Кнопка	Описание	Дисплей	
Массаж		Скорость шиацу, ширина	
		Разминание: Скорость	
		Похлопывание: Скорость, ширина	
		Разминание и похлопывание: скорость	
		Постукивание: Скорость, ширина	
Скорость		3 уровня настройки	
Ширина		3 уровня настройки	
Растяжка спины		Механизм останется в фиксированной позиции	
		Массажный механизм будет двигаться вверх и вниз по ограниченной траектории	
		Массажный механизм будет двигаться вверх и вниз по всей спине	
		Массажный механизм будет двигаться вверх и вниз по спине и зоне плеч	
		Массажный механизм будет двигаться вверх и вниз по спине и пояснице	
		Ручная регулировка под рост пользователя. При правильном положении автосканирование самостоятельно определяет рост.	Массажный механизм движется вверх
		Массажный механизм движется вниз	

Способ использования

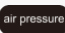
• Воздушно-компрессионный массаж

Функция	Кнопка	Описание	Дисплей
Режим давления воздуха		Полный воздушно-компрессионный массаж: руки, ноги и ступни.	Руки _____ Ступни _____
		Руки: Фокусировка воздушно-компрессионного массажа на руках.	Руки _____
		Ноги: Фокусировка воздушно-компрессионного массажа на ногах и ступнях.	Ступни _____
Интенсивность		3 уровня регулировки	Руки _____ Ступни _____

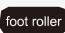
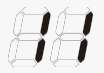
• Функция ручной настройки роликового массажа ступней

Функция	Кнопка	Описание	Дисплей
Ролик для ступней		Включение или отключение функции роликового массажа ступней.	-


• Прогрев

Функция	Кнопка	Описание	Дисплей
Подогрев		Нажмите эту кнопку для включения/отключения инфракрасного излучателя в спинке который прогреет спину до 40-50С в течении 3-х минут	


• Кнопка приостановления/начала массажа

Функция	Кнопка	Описание	Дисплей
Приостановка/Начало		Нажмите эту кнопку во время массажа и все массажные функции немедленно будут остановлены (таймер продолжит отсчет), нажмите ее еще раз - все функции будут возобновлены.	

• Регулировка спинки и голеней

Функция	Кнопка	Описание
поднятия спинки		Нажмите и удерживайте эту кнопку для одновременного поднятия спинки и опускания отдела для ног. Звук "ДиДи" будет означать достижение крайнего положения. Нажмите эту кнопку еще раз по время подъема - и немедленно остановитесь.
опускания спинки		Нажмите и удерживайте эту кнопку для одновременного опускания спинки и поднятия отдела для ног. Звук "ДиДи" будет означать достижение крайнего положения. Нажмите эту кнопку еще раз по время подъема - и немедленно остановитесь.
Нулевая гравитация		При нажатии этой кнопки кресло автоматически займет одну из трех лежачих позиций.

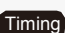• Прочие функции ручного управления

Функция	Кнопка	Описание	Дисплей
Таймер		Настройка времени - при одном нажатии ко времени работы будет добавлено 5 минут, но не более 30 минут. Если значение превысит 30 минут, то зн. вернется к 5 минутам.	28 мин

Способ использования

3.Голосовое управление

• Когда массажное включено или находится в режиме простоя, скажите "Элис Элис" (Alice Alice) для включения функции голосового управления.
 • После успешной активации, массажное кресло ответит "Я здесь" (I am here). После этого, вводимые голосовые команды, отвечающие за определенные функции, активируются в течение 6 секунд. После ответа массажного кресла, может быть выполнена голосовая команда; если в течение 6 секунд голосовая команда успешно не введена, функция голосового управления автоматически отключится и ее нужно будет активировать заново.

• Примечание: Во время активации функции голосового управления, пожалуйста, используйте язык распознаваемый креслом и говорите в среднем темпе, следом за запросом активации должна идти голосовая команда.

Вход в голосовое управление

Слова для активации: "Привет, Элис" (hi Alice). Ответ: "Я здесь (I am here)."

Серийный №	Команда голосового управления	Ответ
1	"Включить массаж (Massage on)"	Ответ: "Окей, включить массаж (Ok, massage on)."
2	"Остановить массаж (Massage close)"	Ответ: "Окей, остановить массаж (Ok, massage close)"
3	"Массаж для комфорта (Comfort Massage)."	Ответ: "Окей, массаж для комфорта (Ok, comfort massage)"
4	"Массаж для расслабления (Relax massage)."	Ответ: "Окей, массаж для расслабления (Ok, relax massage)"
5	"Массаж всего тела (Full body massage)."	Ответ: "Окей, массаж всего тела (Ok, full body massage)"
6	"Массаж плеч и шеи (Neck and shoulder massage)."	Ответ: "Окей, массаж плеч и шеи (Ok, neck and shoulder massage)"
7	"Массаж спины и поясницы (Back and waist massage)."	Ответ: "Окей, массаж спины и поясницы (Ok, back and waist massage)"
8	"Массаж-растяжка (Stretch massage)."	Ответ: "Окей, массаж-растяжка (Ok, stretch massage)"
9	"Фиксированный массаж (Fixed massage)."	Ответ: "Окей, фиксированный массаж (Ok, fixed massage)"
10	"Сменить режим (Change the other mode)."	Ответ: "Окей, сменить режим (Ok, change the other mode)"
11	"Немного ниже (Go little down)."	Ответ: "Окей, немного ниже (Ok, go little down)"
12	"Немного повыше (Go little up)."	Ответ: "Окей, немного повыше (Ok, go little up)"
13	"Открыть давление воздуха (Open the air pressure)."	Ответ: "Окей, открыть давление воздуха (Ok, open the air pressure)"
14	"Закрыть давление воздуха (Close the air pressure)."	Ответ: "Окей, закрыть давление воздуха (Ok, close the air pressure)"
15	"Поднять сидение (Up the seat position)."	Ответ: "Окей, поднять сидение (Ok, up the seat position)"
16	"Опустить сидение (Down the seat position)."	Ответ: "Окей, опустить сидение (Ok, down the seat position)"
17	"Остановить регулировку (Stop ajustment)."	Ответ: "Окей, остановить регулировку (Ok, stop ajustment)"

Способ использования

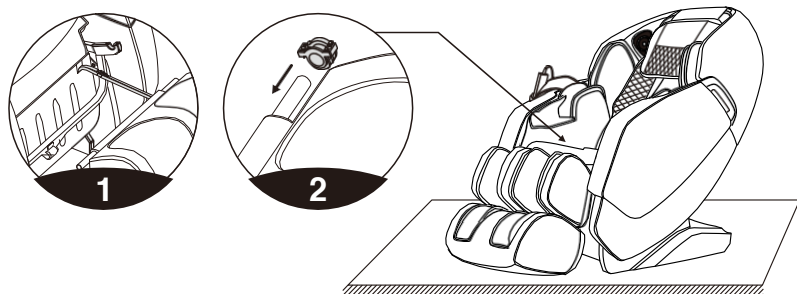
4. Выключение питания и остановка массажа

- Во время нажатия кнопки питания при проведении массажа, все функции немедленно остановятся, спинка и отдел для ног вернутся в свое стандартное положение. При окончании отведенного периода времени, массажный ролик вернется в свою стандартную позицию, все функции немедленно остановятся, спинка и подножка вернутся в свое стандартное положение.
- Отключение питания всего устройства. Рисунок (отключение питания)




5. Установка "голеней" устройства.

- После присоединения воздушного шланга и упряжки к голени устройства и массажному креслу, развяжите фиксирующий ремешок и вставьте соединительную часть в раму. (Рисунок 1).
- Разместите фиксирующий голень блок по обеим сторонам круглых трубок голени (Рисунок 2).




Способ использования

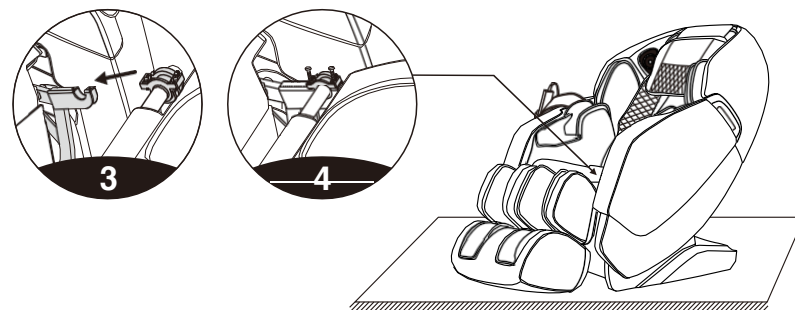- Подвесьте голень фиксирующего блока за крюк на раме массажного кресла (Рисунок 3).
- Затем используйте 4 (по два на каждую сторону) винта M4 для присоединения голени к массажному креслу, проверьте, все ли в порядке, не сложилась ли трубка, и закончите установку (Рисунок 4).



6. Руководство по отсоединению и использованию подушек для головы и спинки кресла

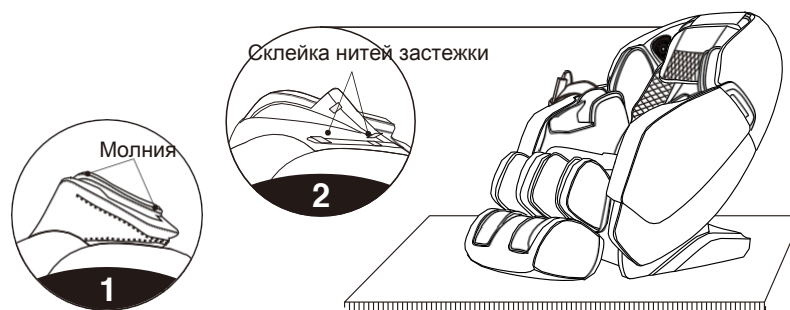
- Подушка для головы позволяет вам контролировать интенсивность массажа шеи и плеч. Вы сами можете решить, применять ее или нет (Мы рекомендуем использовать). Подушка для спины и спинка соединяются молнией (1), подушка для головы и подушка для спины соединены с помощью застёжки, как показано на картинке (2).



Способ использования

7. Защита пола

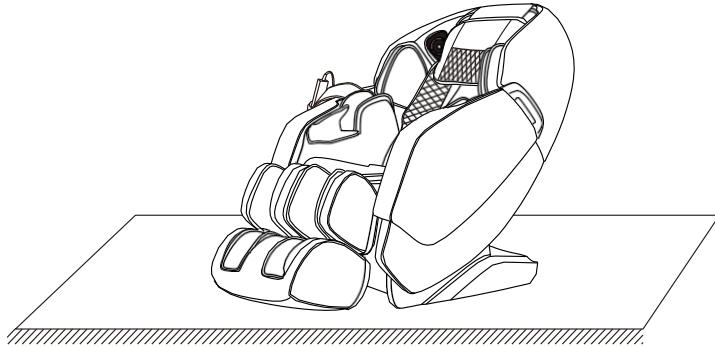
- Установка тяжелого массажного кресла может повредить деревянный пол, так что, пожалуйста, во избежание повреждений пола используйте ковер или иной предмет.



Предостережение: Не передвигайте кресло на колесах по деревянному полу, жесткой поверхности или в узких местах. Для поднятия кресла требуется два человека. Во время поднятия, держите кресло за пластину упора для голеней и за выемки в покрытии спинки (пожалуйста, не поднимайте кресло напрямую за подлокотники.)

8. Способ перемещения

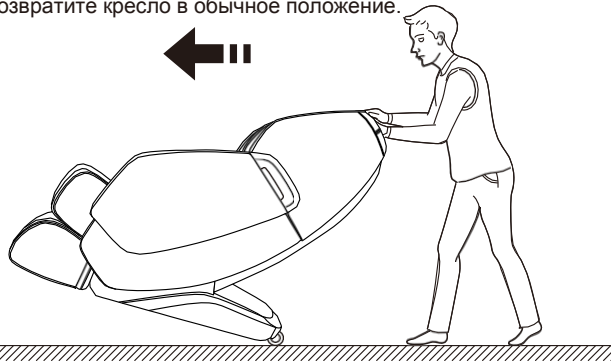- Убедитесь, что все провода находятся далеко от пола, определенным образом наклоните спинку назад (чтобы центр тяжести кресла находился у колес), подтолкните кресло руками вперед или назад, и наконец, медленно и плавно возвратите кресло в обычное положение.




Примечание: Перед перемещением кресла сперва отключите питание, а затем отсоедините шнур питания и провод пульта управления.

Способ использования

9. Расстояние от стены

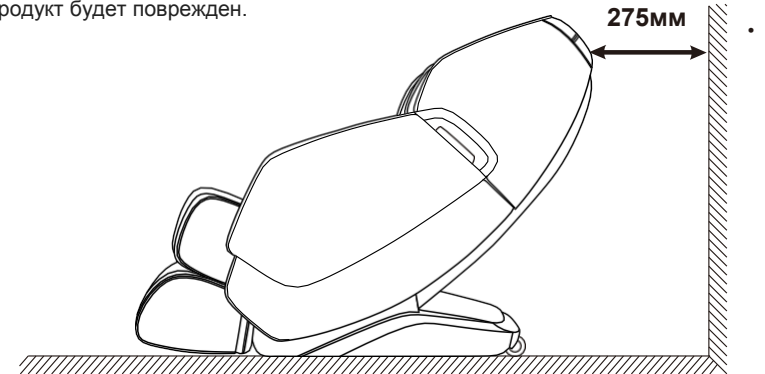- Когда вы размещаете массажное кресло, убедитесь, что спинка всегда находится от стены на расстоянии хотя бы в 275 мм. Если спинка будет расположена слишком близко к стене, то, опускаясь, она врежется в стену и продукт будет поврежден.



Спецификации изделия

Модель: JERA ORTO

Артикул: A302

Напряжение: 110-120V~ 60Hz

220-240V- 50Hz/60Hz

Мощность: 120W

Время использования: 20Мин

Структура безопасности: Класс I

Представление материалов: ПВХ, полиамид, стальные части и электрические/электронные детали

МАТЕРИАЛ	ПУ	КОЖА	ТКАНЬ	ДЕРЕВО

Гарантийные обязательства и талон

Данный гарантийный талон дает право на бесплатный ремонт массажного кресла JERA ORTO дилером в течении 3-х лет со дня продажи изделия.

Перечисленные в этом разделе гарантии являются полным списком предоставляемых гарантий и действует в случае, если письмо с уведомлением получено авторизованным дилером в течении 10-ти рабочих дней с момента обнаружения неисправности. Оно должно содержать изложение неисправности и сопровождаться копиями документов, подтверждающих факт совершения покупки.

Гарантия действительна только при наличии товарного чека на приобретенное изделие.

На все детали и комплектующие, установленные в ходе гарантийного ремонта, распространяется гарантия на срок, не превышающий остатка срока первоначальной гарантии. Гарантия не распространяется на повреждения и износ обивки кресла.

В случае невозможности провести необходимый ремонт, дилер оставляет за собой право заменить массажное кресло на новое, адекватное по стоимости неисправному массажному креслу на дату приобретения.

Гарантия прекращает свое действие, если ремонт массажного кресла производился кем-либо, кроме дилера или уполномоченного агента.

В случае необходимости доставки кресла в сервисный центр, расходы по транспортировке оплачивает владелец массажного кресла.

При эксплуатации изделия на коммерческой основе или при общественном использовании, срок гарантии сокращается до 1 года.

Гарантийное обслуживание не производится в случаях:

- небрежного хранения или транспортировки
 - нарушение правил эксплуатации
 - механических повреждений изделия, следов воздействия химических веществ
 - ремонтных работ, производимых не сервисным центром
 - повреждений или нарушений нормальной работы, вызванных животными или насекомыми
 - использования изделия не по назначению
 - неисправностей, вызванных действием неопределимой силы (пожара, стихийных бедствий и т.д.)
 - блокировки подвижных элементов изделия при попадании посторонних предметов
- Диагностика и ремонт изделия после истечения гарантийного срока осуществляется за счет клиента.

Гарантийный ТАЛОН

Дата покупки _____ Наименование товара _____
Компания-продавец _____ Телефон _____
ФИО клиента _____

С правилами эксплуатации, противопоказаниями, и рекомендациями ознакомлен. Претензий не имею
_____/_____ (подпись, расшифровка)

История и предназначение

Товарный знак нашей компании - это японский иероглиф «Чо Ку Рей» (CHO KU REI), который содержит в себе огромную энергию, часто этот символ используется в восточной медицине.

В переводе с японского означает «Бог здесь» или «Вся сила здесь»

Он отвечает за открытие источника энергии, доступ к энергии Рейки, усиление энергетического потока, духовную защиту. Из-за его спиралевидной формы он способен фокусировать универсальную энергию. Он усиливает поток Рейки и увеличивает целительную силу.

Использование этого символа значительно ускоряет процесс заживления ран, способствует ослаблению и полному исчезновению болей различного рода. Снижает нервозность и раздражительность, развивает интуицию. Усиливает положительную энергетику и ослабляет негативные воздействия. Активирует внутренние функции, восстанавливая ритм и баланс, вводя в резонанс с энергией Земли.

Вы можете найти больше информации об этом символе в интернете.
[www. jera-russia.ru](http://www.jera-russia.ru)

MASSAGE CHAIR / МАССАЖНОЕ КРЕСЛО

model / модель: ORTO

vendor code / артикул: A302

Manufacturer / Производитель: Zhejiang Haozhonghao Health Product Co.,Ltd.,
No.85 FURNITURE GARDEN WANQUAN INDUSTRY BASE PINGYANG, ZHEJIANG, CHINA

input voltage / напряжение: 220v /50 Hz

power consumption / мощность: 120 watt



DATE MANUFACTURE / ДАТА ПРОИЗВОДСТВА:

