

**OTO**

**ADORE FOOT warm**

AFW-90

---

Руководство пользователя

## Спасибо!

Благодарим Вас за выбор продукции ОТО которая призвана улучшить Ваше здоровье. Все товары ОТО перед продажей уже прошли проверку и отвечают требованиям безопасной и надежной эксплуатации для домашнего пользования. Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию, чтобы понять, как правильно пользоваться и обслуживать массажер.

## Авторское право

Все права защищены. Никакая часть содержания данного руководства не может быть воспроизведена, передана, распространена, переведена или сохранена в любой форме и любыми средствами без предварительного письменного разрешения от ОТО.

# СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности.....	1
Состав массажера.....	2
Описание функций.....	3
Устранение проблем.....	4
Порядок чистки и хранения.....	5
Спецификация.....	6


# МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Следующие лица должны проконсультироваться с врачом перед применением массажера:
  - Если у вас установлен кардиостимулятор или другой медицинский искусственный имплант
  - Если у вас проблемы с сердцем
  - Если у Вас проблемы с позвоночником и другие заболевания спины
  - Если у Вас слабые или переломанные кости, особенно в области спины
  - После операции
  - Во время беременности или сразу после родов
  - Если у Вас злокачественная опухоль
  - При остеопорозе
  - При проблемах с циркуляцией крови и тромбозе
  - При кожных инфекциях
  - При прохождении медицинского лечения
  - Если у Вас ненормальное физическое развитие
  - Если у Вас в прошлом были заболевания или травмы спины
2. Не допускайте попадания воды или брызг внутрь или на поверхность массажера.
3. Контакт электричества с водой опасен. Не эксплуатируйте массажер в условиях повышенной влажности (например, в ванной комнате или душевой или возле бассейна).
4. Перед подключением массажера к сети, убедитесь, что напряжение питания соответствует указанным параметрам на массажере.
5. Если сетевая вилка, сетевой шнур или сам массажер повреждены, не используйте его.
6. Для предотвращения риска поражения электрическим током, не открывайте его корпус.
7. Массажер не предназначен для использования людьми с физическими или психическими нарушениями (включая детей), если нет надлежащего надзора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
8. Если массажер или шнур питания повреждены, не пытайтесь его ремонтировать. Ремонт должен выполняться уполномоченными специалистами ОТО, в противном случае гарантия на массажер теряет силу.
9. Детям запрещено использовать этот массажер без присмотра взрослых. Это гарантирует, что они не будут играть с массажером.
10. Если из массажера издается необычный звук или шум, выключите его и отсоедините от питания. После этого обратитесь в авторизованный Сервисный центр ОТО за консультацией.
11. Не используйте массажер, если поврежден его корпус или есть механические или электронные неисправности. Обратиться в уполномоченный Сервисный центр ОТО.
12. Используйте массажер только согласно инструкциям изложенным в данном руководстве пользователя.
13. Не используйте этот массажер при высокой температуре или вблизи обогревающего оборудования или предметов, таких как нагреватели, камин или печи.
14. Не применяйте медицинские или косметические кремы при использовании массажера или не обрабатывайте ими ноги перед использованием массажера.
15. Пожалуйста, удалите все украшения и аксессуары с ног перед массажем.
16. Не ломайте, не сгибайте, не растягивайте, не скручивайте и не связывайте шнур питания. Поврежденный шнур питания может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
17. Люди, чувствительные к теплу, не должны использовать тепловую функцию массажера.
18. Рекомендуемое время сеанса одним человеком - 15 минут в день.

**Электромагнитные поля (EMF)** Этот продукт ОТО соответствует всем стандартам электромагнитных полей (EMF). При правильном обращении, в соответствии с инструкциями, приведенными в этом руководстве пользователя, изделие безопасно в использовании.


# СОСТАВ МАССАЖЕРА

1. Панель управления
2. Ниши для ног
3. Матерчатый чехол
4. Ножки
5. Опора

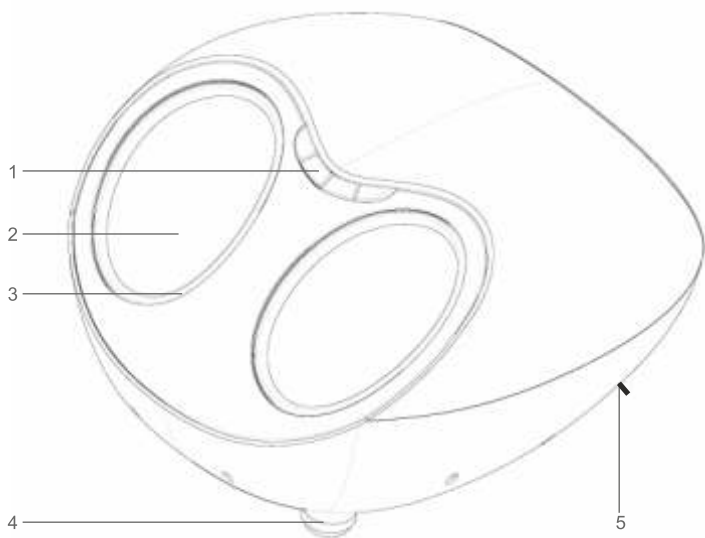

## Панель управления

- A. Кнопка ВКЛ / ВЫКЛ
- B. Режимы массажа
- C. Интенсивность
- D. Тепловая терапия

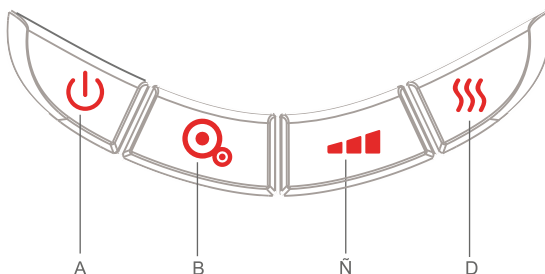

# ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

Кнопки управления выполняют следующие функции:

№	Кнопка	Функция	Индикация
1.		Нажмите кнопку, для включения режима 1 по умолчанию с низкой интенсивностью и тепловой терапией. Нажмите кнопку еще раз, чтобы выключить массажер.	Включение: Красный свет Режим: Синий свет Интенсивность: Синий свет Подогрев: Красный свет
2.		3 режима массажа	Режим 1: Синий свет Режим 2: Желтый свет Режим 3: Синий и желтый мигающий свет
3.		3 уровня интенсивности	Низкая: Синий свет Средняя: Красный свет Высокая: Синий и Красный мигающий свет
4.		Тепловая терапия стопы	Включена: Красный свет Выключена: Нет света

Авто Таймер: 15 минут. Питание автоматически выключается после 15 минут, чтобы предотвратить перегрев массажера.

Всегда выньте вилку из розетки после использования массажера.

# РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

На этой странице приведены наиболее распространенные проблемы, которые могут возникнуть с массажером. Если вы не можете решить проблему с помощью приведенной ниже информации, незамедлительно свяжитесь с компанией ОТО или ее официальным дилером.

Если возникшая проблема не описана в приведенной ниже таблице, попробуйте проделать следующие действия:

1. Выключите массажер и отключите его от сети.
2. Подождите 60 минут.
3. Подключите массажер к сети и снова включите его.
4. Если проблема не устраняется, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Проблема	Возможная причина	Решение
Массажер не работает	Массажер не подключен должным образом.	Убедитесь, что напряжение питания массажера соответствует напряжению сети, и подключите его снова.
	Массажер только что закончил 15 минутный сеанс и автоматически переключился в режим ожидания.	Если Вы хотите снова начать сеанс, нажмите кнопку ВКЛ / ВЫКЛ еще раз.
	Возможно, вы без перерыва использовали массажер в течении 40 минут, в результате чего сработала защита от перегрева.	Отключите массажер от сети и дайте ему остыть в течении 60 минут, после чего снова его включите.
	На массажер была оказана чрезмерная нагрузка.	Уберите нагрузку и снова включите массажер.
Массажер сильно нагрелся.	Массажер использовался большое количество времени.	Отключите массажер и дайте ему остыть, прежде чем использовать его снова.
Во время работы массажера издается шум.	Этот звук вызван работой мотора массажера.	Прослушивание звука механизмов вполне нормально и не означает, что массажер неисправен.

# ПОРЯДОК ЧИСТКИ И ХРАНЕНИЯ

## **Очистка**

Никогда не используйте металлические губки, абразивные чистящие средства или агрессивные жидкости, такие как бензин или ацетон для очистки массажера.

Не погружайте массажер в воду.

1. Выньте вилку из розетки перед чисткой.
2. Очистите массажер сухой тканью.
3. Не используйте влажную ткань или чистящее средство.

## **Хранение**

1. Выньте вилку из розетки.
2. Храните массажер в прохладном и сухом месте, вдали от солнечных лучей.
3. Не кладите тяжелые предметы на массажер.

Если корпус массажера поврежден или имеются какие-либо механические повреждения, пожалуйста, прекратите использование массажера. Немедленно обратитесь в авторизованный Сервисный центр ОТО в Вашем регионе.

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование	Технические характеристики
Наименование	ОТО Adore Foot warm
Модель	AFW - 90
Тип	Массажер для ног
Входное напряжение питания	АС ~ 100-240 В, 50 / 60 Гц
Потребляемая мощность	35 Вт
Автоматический таймер	15 минут
Габаритные размеры массажера	423 (Д) x 391 (Ш) x 242 (В) мм
Габаритные размеры в упаковке	426 (Д) x 272 (Ш) x 476 (В) см
Вес (Нетто / Брутто)	5.5 / 7.0 кг
Сертификат соответствия РОСТЕСТ	RU C-SG.АЛ16.В.27516
Сертификат качества ISO 9001:2008	

# ВСЁ ЛУЧШЕЕ ОТ ОТО

Уже более чем 30 лет компания ОТО создает инновационные продукты для здоровья и постоянно совершенствует свои знания в этой области. Итогом многолетней работы является продукция компании, в которой сбалансированы традиционные знания Востока и революционные технологии Запада.

Основным направлением деятельности компании ОТО является производство товаров, помогающих людям жить лучше и дольше. Товары ОТО для фитнеса и отдыха поддерживают тело в тонусе и помогают его омоложению. Развивая свой бизнес, ОТО стремится стать народной маркой, выпуская общедоступные товары.

## ***НОВАЯ ЛИНЕЙКА ТОВАРОВ ОТО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ***

### **Массажные кресла**



**ОТО STARK**



**ОТО Absolute**



**ОТО Elite**

### **Массажеры для ног**



**ОТО Adore Foot**



**ОТО Activ Foot**



**ОТО e-Physio**

### **Массажеры для спины**



**ОТО eLux**



**ОТО Back Sniggle**



**ОТО mBraze**



**OTO**

*Founded in Singapore*

[www.otobodycare.ru](http://www.otobodycare.ru)