

**HANSUN**韩尚

**F刮痧T**  
GUA SHA REFLEXOLOGY

**HANSUN**韩尚



Массажер ног

Модель: **FC1006**  
Руководство пользователя

Благодарим Вас за выбор массажера ног HANSUN FC1006, который призван улучшить Вашу жизнь, сделав её более комфортной. Пожалуйста, тщательно прочитайте и изучите это руководство по эксплуатации для правильного использования массажера и ухода за ним. Всегда сохраняйте данное руководство под рукой для удобства. Массажер ног HANSUN FC1006 предназначен только для домашнего использования.

## Содержание

---

Меры безопасности .....	1
Состав массажера .....	3
Состав и функции .....	4
Порядок использования .....	6
Чистка и Хранение .....	7
Устранение проблем .....	8
Спецификация .....	9

## Спецификация

---

Тип: Массажер ног

Модель: FC1006


Напряжение питания: 110-240 В / 50~60 Гц

Вых. питание адаптера: 24 В


Мощность: 48 Вт

## ► Устранение проблем

Проблема	Возможная причина	Решение
Массажер не работает	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Нет питания</li> <li>2. Переключатель питания выключен</li> <li>3. Сработала защита от перегрева</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Подключите вилку в розетку</li> <li>2. Переверните переключатель в положение ВКЛ</li> <li>3. Включите массажер снова, после того как он остынет</li> </ol>
Массажер перестал работать	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Отключилось питание</li> <li>2. Время массажа закончилось (15 минут)</li> <li>3. В результате длительного использования, массажер перегрелся</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверьте наличие питания</li> <li>2. Включите кнопку питания заново</li> <li>3. Включите массажер снова, после того как он остынет</li> </ol>

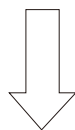

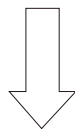

Если возникшая проблема не была решена вышеуказанными способами



Прекратите использование массажера и обратитесь в Сервисный центр за консультацией

## ► Меры безопасности

Всегда соблюдайте указанные меры безопасности для предотвращения причинения вреда людям и ущерба имуществу. Риски, связанные с неправильным использованием массажера, классифицируются в соответствии со степенью опасности и возможными повреждениями.

 ВНИМАНИЕ	Указывает на риск серьезных травм и смерти
 ОСТОРОЖНО	Указывает на риск получения травм или повреждений массажера

### A . ВНИМАНИЕ!

1. Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию перед использованием массажера, для обеспечения мер безопасности.
2. Пожалуйста, используйте массажер только в соответствии с данной инструкцией.
3. Следующие лица должны проконсультироваться с врачом перед использованием массажера:
  - 1) Люди, проходящие медицинское лечение или находящиеся под наблюдением врача
  - 2) Люди, использующие имплантированные медицинские электронные устройства, восприимчивые к электромагнитным помехам, например кардиостимуляторы
  - 2) Люди со злокачественными опухолями
  - 3) Люди с пороком сердца
  - 4) Женщины, во время беременности или сразу после родов
  - 5) Люди с сенсорными нарушениями в результате развития периферической нейропатии при диабете и т. д.
  - 6) Люди с остеопорозом и острыми болезненными травмами, такими как перелом позвоночника, вывихи, растяжения мышц и т. д.
  - 7) Люди с открытыми и закрытыми ранами в области воздействия массажера
  - 8) Люди, нуждающиеся в покое или чувствующие себя очень плохо
  - 9) Люди с острой сосудистой недостаточностью в области ног
  - 10) Люди, страдающие от грыжи позвоночных дисков
  - 11) Люди, имеющие другие, отличные от вышеперечисленных, физические проблемы
4. Отключите вилку из розетки после использования массажера или перед его чисткой.
5. Во избежание ожога, осторожно используйте функцию обогрева. Исключите эту функцию, если у Вас слишком чувствительная кожа или наоборот Вы не ощущаете тепловое воздействие. Неправильная эксплуатация массажера может привести к опасным последствиям.
6. Не используйте массажер под подушкой или одеялом. В противном случае, это может стать причиной пожара, поражения электрическим током или повреждения массажера из-за перегрева.
7. Не накрывайте массажер во время его эксплуатации. В противном случае, двигатель может сломаться от чрезмерного перегрева.
8. Не оставляйте массажер без присмотра и не допускайте его использование детьми, людьми с психическими и физическими нарушениями или потерей трудоспособности. Обязательно нужен тот, кто будет следить и отвечать за их безопасность.
9. Немедленно остановите массаж, если почувствовали себя плохо.

## ► Меры безопасности

10. Не используйте массажер в следующих случаях: если шнур питания или вилка повреждены; если массажер не работает корректно; если массажер упал на землю и повредился; если массажер попал в воду. Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для осмотра и обслуживания массажера.
11. Не используйте неоригинальные аксессуары и комплектующие, от других производителей.
12. Не вставляйте и не роняйте какие-либо предметы внутрь массажера через технологические отверстия в его корпусе.
13. Если Вы хотите отключить питание, выключите все кнопки и только после этого выньте вилку из розетки.
14. Этот массажер нельзя использовать для самостоятельной диагностики и лечения.

### В. ОСТОРОЖНО!

1. Если во время использования массажера, у Вас возникли какие-либо физические проблемы, или если Вы почувствовали дискомфорт, немедленно прекратите использование массажера и обратитесь к врачу. Пренебрежение данной рекомендацией может привести к несчастному случаю или болезни.
2. Рекомендованное время сеанса массажа составляет 15 минут. Если Вы хотите продолжить массаж, сделайте перерыв 30 минут перед началом повторного сеанса. Пренебрежение данной рекомендацией может привести к несчастному случаю или травме.
3. Берегите массажер от контакта с водой.
4. В период когда массажер не используется, не оборачивайте шнур вокруг основного корпуса, во избежание повреждения шнура питания.
5. Не используйте массажер в ванной или других местах с повышенной влажностью. Пренебрежение данной рекомендацией может привести к поражению электротоком или неисправности.
7. При чистке обязательно отключайте вилку питания из розетки, чтобы избежать поражения электрическим током или ожога.
8. Если Вы не пользуетесь массажером, отключите вилку питания из розетки.
9. Не наступайте на основной блок массажера.
10. Не бросайте массажер. Пренебрежение данной рекомендацией может привести к травме или поломке массажера.

## ► Порядок чистки и хранения

### А. Порядок чистки

1. Выключите массажер и отключите вилку из розетки перед чисткой.
2. Для чистки используйте чистую и сухую тряпку.
3. Никогда не используйте растворитель, бензин или спирт при чистке поверхности массажера.



### Внимание

- ▶ Не тяните за вилку шнура питания влажными руками.
- ▶ Не используйте моющее средство для воды, не распыляйте воду или другие жидкости внутрь массажера.
- ▶ Не используйте едкие чистящие средства, такие как бензол или растворитель, для чистки массажера. Иначе цвет покрытия может измениться и внешний вид массажера испортится.
- ▶ Не проглаживайте внешнее покрытие массажера.
- ▶ Когда массажер намок, не разбирайте его, дайте массажеру просохнуть естественным образом.

### В. Порядок хранения

1. Если Вы не используете массажер, уберите его в коробку и храните в безопасном, прохладном, вентилируемом и сухом месте.
2. Не сгибайте провод питания.
3. Не разбирайте массажер и оберегайте его от падения с высоты.
3. Храните массажер в недоступном для детей месте.
4. Не храните массажер совместно с предметами, которые будут размещаться на его поверхности. Поверхность может поцарапаться или окраситься от данных предметов.
5. При возобновлении использования массажера после долгого перерыва, включите кнопку питания до использования и убедитесь, что массажер работает корректно, индикация и массаж выполняются без сбоев.

## ► Порядок использования

### Перед использованием



1. Пожалуйста, проверьте исправность массажера
2. Пожалуйста, разместите массажер на плоской и ровной поверхности

### Порядок использования

#### Шаг 1:

Подключение к сети питания

В первую очередь, пожалуйста, подключите разъем адаптера питания к массажеру и после этого вставьте вилку адаптера питания в розетку.

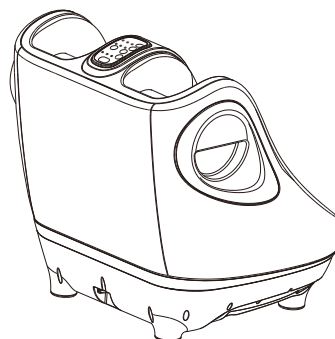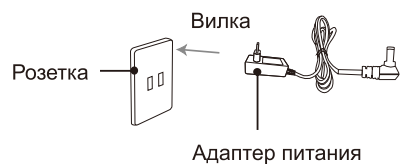


#### Шаг 2:

Сядьте на диван или кресло с соответствующей высотой, а затем вставьте ноги в ниши массажера, как показано на рисунке справа.



#### Шаг 3:

Нажмите кнопку Питание , чтобы запустить массаж, после чего Вы можете наслаждаться массажем.


### После использования

1. Нажмите кнопку Питание, чтобы выключить массажер
2. Отключите вилку шнура питания от розетки.


## ► Состав массажера



Вид сзади на основание

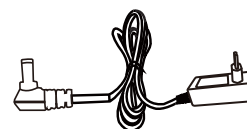

Адаптер питания

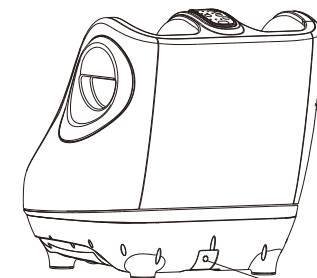


Разъем питания

### Внимание

1. Не вставляйте во время использования массажера и не кладите на него тяжелые предметы, что может привести к его повреждению.
2. Перед перемещением массажера, убедитесь, что он отключен от питания.
3. Не позволяйте маленьким детям находиться рядом с массажером во время его использования.

## ► Состав и функции

### Панель управления

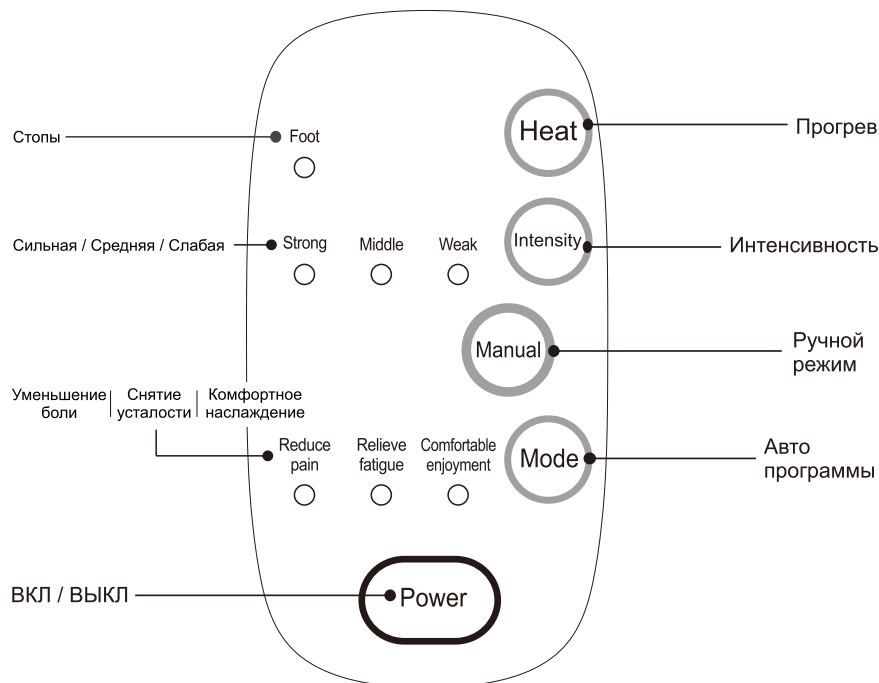

### ⚠ ВНИМАНИЕ!

1. Не проливайте воду на панель управления
2. Не нажимайте кнопки слишком сильно, чтобы избежать поломки массажера и некорректной работы программ
3. Пожалуйста, используйте сухую ткань для очистки панели управления. Не применяйте при очистке растворитель, бензин или спирт.
4. Пожалуйста, не используйте массажер в вертикальном положении и не кладите на него тяжелые предметы.
5. Во избежании поломок, пожалуйста, не стойте и не садитесь на массажер.
6. При перемещении массажера не тяните его за шнур питания, чтобы избежать повреждения.

## ► Состав и функции

### Функции кнопок управления



#### Кнопка ПРОГРЕВ ОБЛАСТИ СТОПЫ

Нажмите эту кнопку, чтобы активировать функцию прогрева в области стопы. Нажмите кнопку повторно, чтобы выключить прогрев в области стопы. Индикатор загорается, когда функция активирована. Индикатор не горит, если функция выключена. (При включении обогрева стопы активируется по умолчанию)



#### Кнопка ИНТЕНСИВНОСТЬ КОМПРЕССИИ

Нажмите эту кнопку, чтобы настроить интенсивность воздействия воздушно-компрессионного массажа. Последовательное нажатие кнопки циклично изменяет интенсивность в последовательности: высокий, средний и низкий уровень. (При этом включается и гаснет соответствующий индикатор).



#### Кнопка РУЧНОЙ РЕЖИМ

Кнопка включает ручной режим выбора воздушно-компрессионного массажа или режим Гуаша массажа стопы. Нажмите кнопку один раз, при этом загорится индикация кнопки и включится компрессионный режим. Нажмите кнопку еще раз, при этом индикация кнопки начнет мигать, и включится режим Гуаша. Повторное нажатие выключает ручной режим.



#### Кнопка АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

Последовательное нажатие этой кнопки активирует переключение трех автоматических режимов массажа: **Reduce pain** (Уменьшает боль в ногах и способствует снятию стресса), **Relieve fatigue** (Снимает усталость и мышечное напряжение ног), **Comfortable enjoyment** (Снимает нервное напряжение и дарит расслабление и комфорт). По умолчанию активируется автоматический режим **Comfortable enjoyment**.



#### Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

Для начала работы массажера, подключите питание и нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на панели управления. При этом активируется массаж в автоматическом режиме и загорается индикатор питания. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ еще раз, чтобы выключить массажер. Индикатор питания при этом погаснет. (Время работы массажера по умолчанию составляет 15 минут).

### ⚠ ВНИМАНИЕ!

- Если во время массажа произошел сбой питания, отключите массажер от сети и отсоедините штекер питания от разъема массажера.
- Пожалуйста, не вставляйте ваши руки или пальцы в зазоры массажера, что может привести к травмам.
- Пожалуйста, не позволяйте детям и домашним животным играть с массажером, что может привести к травмам или поломке массажера.